

23064

SP293/ 8855E

GEBRAUCHSANLEITUNG

DREIFACHAKTIONS- FUßMASSAGEGERÄT

A. GESUNDHEITLICHE WARNHINWEISE



Bitte befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie sich in einer der folgenden Situationen befinden:

- Schwangerschaft
- Herzerkrankungen, insbesondere wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen
- Diabetes
- Tuberkulose
- gutartige oder bösartige Tumore
- Bedenken bezüglich Ihres Gesundheitszustands

Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes an Körperteilen, die unter einer der folgenden Erkrankungen leiden:

- Blutungen
- Verletzungen
- Schwellungen
- Hautausschläge
- Verbrennungen
- Krampfadern
- offene Wunden
- Zonen, die eine schlechte Durchblutung aufweisen
- blaue Flecken
- Hautabschürfungen, Kratzwunden
- Venenentzündung
- Thrombose
- Körperteile, die von einer Lähmung oder einer Anästhesie betroffen sind unerklärlicher Schmerz in der von der Massage betroffenen Zone innerhalb von 72 Stunden nach einer Muskel- oder Gelenkverletzung

B. SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SICHERHEITSHINWEISE VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

1. GEFAHR!

Zur Verringerung der Gefahr eines tödlichen Stromschlags:

- 1) Ziehen Sie immer sofort den Gerätestecker aus der Steckdose, nachdem Sie die Anwendung beendet haben und bevor Sie das Gerät aufräumen oder reinigen.
- 2) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** während des Badens oder während Sie schlafen.
- 3) **VERSUCHEN SIE NICHT**, das Gerät herauszuholen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
- 4) **TAUCHEN SIE** das Gerät **NICHT** ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- 5) **LEGEN SIE** das Gerät **NICHT** an eine Stelle, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte, und bewahren Sie es nicht an einer solchen Stelle auf.
- 6) **STEIGEN SIE NICHT** auf das Gerät.

2. ACHTUNG!

Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes, eines tödlichen Stromschlags, von Verbrennungen oder Verletzungen:

- 1) Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie es aufräumen, bevor Sie Zubehörteile entfernen oder das Gerät reinigen.
- 2) Gehen Sie vorsichtig mit heißen Oberflächen um, denn sie können schwere Verbrennungen verursachen.
- 3) Das Gerät hat eine Fläche, die heiß werden kann. Wärmeunempfindliche Personen sollten daher vorsichtig beim Umgang mit dem Gerät sein.
- 4) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** an empfindlichen Stellen der Haut oder an Stellen, die eine schlechte Durchblutung aufweisen.
- 5) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT**, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde.
- 6) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** im Freien. Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt.
- 7) Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen, von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- 8) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** unter einer Decke oder unter einem Kopfkissen. Die extreme Hitze kann zu einem Brand, einem tödlichen Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
- 9) **TRANSPORTIEREN SIE** das Gerät **NICHT**, indem Sie es am Netzkabel halten, und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- 10) Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Anwendungen.
- 11) **VERWENDEN SIE KEINE** Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- 12) **FÜHREN SIE KEINEN** Gegenstand in die Geräteöffnungen **EIN** bzw. lassen Sie ihn nicht in diese eindringen.
- 13) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** an einem Ort, an dem Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an dem Sauerstoff verabreicht wird.
- 14) Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Gerätestecker, nachdem Sie alle Bedienelemente ausgeschaltet haben.
- 15) **ACHTUNG: VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung.
- 16) Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, Stromkabel oder Stecker feststellen oder wenn es nicht normal funktioniert, heruntergefallen ist oder anderweitig eine Störung aufweist. Bringen Sie das komplette Gerät zu einem anerkannten Elektriker und lassen Sie es kontrollieren und/oder reparieren. Fragen Sie immer nach Originalteilen. Es ist ein gleichwertiges Kabel zu verwenden.




Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen vorgesehen, außer wenn diese angemessen beaufsichtigt werden oder entsprechende Anleitungen zur Verwendung des Geräts von einer Person erhalten, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn Beschwerden empfunden wird, schalten Sie das vibrierende Fußmassagegerät aus. Das nächste Mal, wenn Sie es benutzen, empfehlen eine Sitzung bis zu einer Dauer von maximal 10 Minuten.

C. GERÄTEDARSTELLUNG

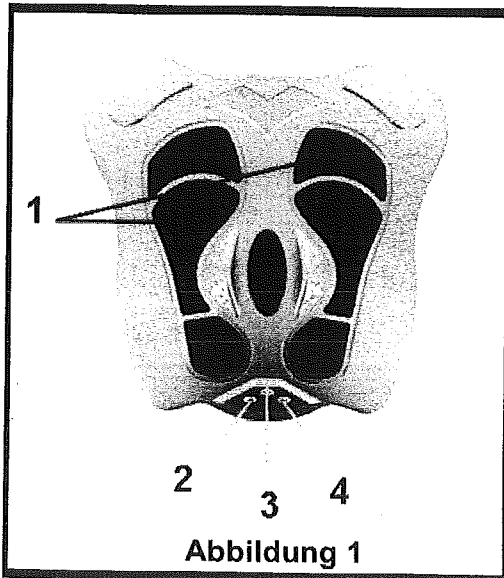


1. Infrarot Fußwärmeabgabebereich
2. AN /AUS-Taste
3. Vibrationsbeschleunigungstaste
4. Vibrationsreduktionstaste

D. FUNKTIONEN

- Diese innovative Fußmassagegerät erlaubt 3 Aktionen zum Wohlbefinden:
 1. Vibrierende Massage zum Entspannen,
 2. Infrarot-Wärme zur Beruhigung
 3. Reflextherapie, um den Stoffwechsel anzuregen.
- Einstellbare Geschwindigkeit der Vibrationsmassage und Infrarotwärme
- Eingebauter Timer für ca. 15-20 Minuten

E. ANWENDUNG

- 1) Stellen Sie das Gerät auf einen festen Boden und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- 2) Legen Sie beide Füße bequem auf das Massagegerät.
HINWEIS: STEIGEN SIE NICHT auf das Massagegerät.
- 3) Um das Gerät **EINZUSCHALTEN**, drücken Sie den Schalter ON/ OFF (3).
Um das Gerät **AUSZUSCHALTEN**, drücken Sie erneut den Schalter ON/ OFF (3) (siehe Abb.
- 4) Dieses Gerät bietet 3 Vibrationsgeschwindigkeiten. Die Vibration in niedriger Geschwindigkeit wird aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste (2) einmal, um die Intensität zu beschleunigen (siehe Abbildung 2). Drücken Sie die Taste erneut, um zu einer höheren Geschwindigkeit zu wechseln.
- 5) Drücken Sie die Taste (4) zur Reduzierung der

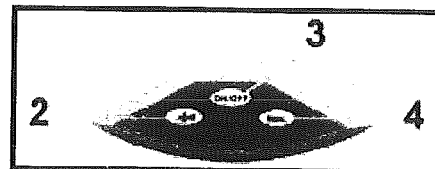

Vibrationen.

F. TECHNISCHE DATEN

230VAC, 50Hz, 20W

G. PFLEGE

- Reinigen Sie das vibrierende Fußmassagegerät mit einem trockenen Tuch oder Handtuch ohne Wasser. Die Teile, die in direktem Kontakt mit der Haut kommen, können mit Alkohol desinfiziert werden.
- Verwenden Sie kein Benzin oder anderes Lösungsmittel zum Reinigen.
- Bewahren Sie das vibrierende Fußmassagegerät bei niedrigen Temperaturen trocken und an einem gut belüfteten Ort auf.

H. PROBLEMBEHANDLUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Wenn Sie AN / AUS drücken, leuchtet der Infrarot-Fußwärmeabgabebereich nicht auf.	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät eingeschaltet ist.2. Schalten Sie die Stromversorgung aus, dann erneut starten und überprüfen, ob es normal funktioniert.3. Prüfen Sie, ob der Netzstecker Kontakt mit der Steckdose hat.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD