


Peak Flow Meter Personal Best

Artikelnummer: 259.39000




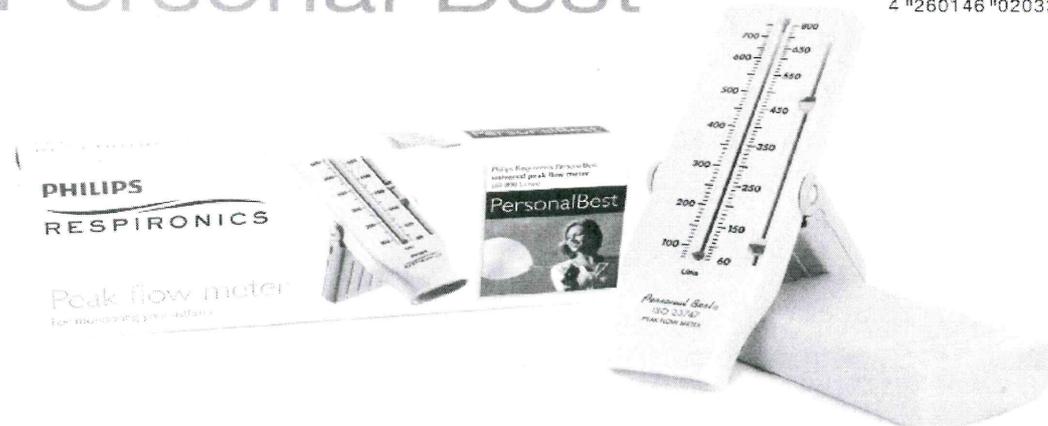


1200370

- pour mesurer le débit expiratoire maximal
- Débitmètre maximal avec système de zone intégré pour le traitement de l'asthme
- plage de mesure complète (60-800 l / min)

instructions:

1. Retirez le couvercle (Figure 1)
2. Pliez le couvercle monté sur le fond et tournez-le. En appuyant ensemble sur les deux moitiés, (Figure 2). Tenez le compteur sur cette poignée pendant que vous mesurez votre débit maximal.
3. Déplacez le pointeur rouge vers l'extrémité inférieure de l'échelle (Figure 3).
4. Imaginez. Respire le plus profondément possible, et fermez fermement l'embout buccal Lèvres (Figure 4). Respire aussi fort que possible sans cracher ou tousser, car cela peut conduire à des résultats de mesure élevés erronés. Le numéro auquel le pointeur est en position, indique votre valeur maximale de débit.
5. Répétez les étapes 3 et 4 et effectuez un total de trois mesures. Portez la plus haute valeur atteinte dans votre tableau de valeurs mesurées

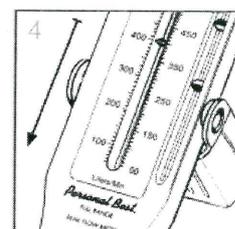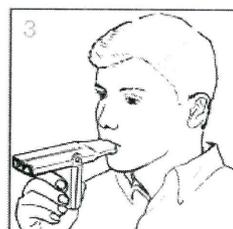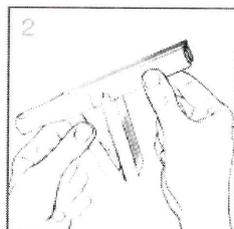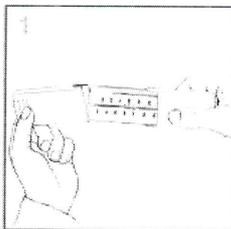

Vertrieb: HaB GmbH, Rathausstr. 44, D-21423 Winsen

Lungentrainer.de

Personal Best - Peak-Flow-Meter pour enfants et Adultes

Le débitmètre personnel Best Best est utilisé pour contrôler et mesurer la fonction pulmonaire, en particulier.

Les patients souffrant de maladies respiratoires, tel asthme:

Un indicateur important de la fonction pulmonaire est le débit maximal expiratoire (PEFR); la mesure de la distance respiratoire.

La mesure quotidienne du débit maximal et l'enregistrement des valeurs mesurées est à tenir dans un journal que vous pouvez donner à votre Docteur. Cela permet de traiter les informations nécessaires à votre traitement. L'application de l'instrument de mesure et le

L'ajustement des marques de couleur doit être effectué selon le plan de traitement que votre médecin qu'il vous a préparé

Ce compteur vous aide à conserver votre plan de traitement. A tout moment vous pouvez vérifier si votre état est stable ou s'est affaibli. Les valeurs en baisse indiquent une aggravation Fonction pulmonaire et rétrécissement de vos voies aériennes. Votre médecin présente les pointeurs des zones de couleur selon votre valeur maximale de débit maximal mesurée (une valeur de comparaison vous permet de comparer. Le jour où votre asthme est bien contrôlé). lorsqu'il est expiré dans l'instrument de mesure, pointeur vers votre valeur de débit maximale actuelle qui se trouve dans l'une des trois gammes suivantes:

Vert: votre valeur de pointe est supérieure à 80% de votre meilleur indice de référence. Gardez votre horaire de médicaments et continuez vos activités normales.

Jaune: votre valeur de débit maximal est de 60 à 80% de votre meilleure valeur. Votre asthme s'est peut-être dégradé.

Suivez les instructions pour l'apport médicamenteux pour revenir au **vert**

Zone à venir. Parlez à votre médecin si cela ne s'améliore pas.

Rouge: votre valeur de débit maximal est inférieure à 60% de votre meilleure valeur. Contactez votre médecin.

Vérifiez régulièrement si votre meilleur compteur personnel fonctionne correctement. Pièces mobiles devrait être gratuit et facile à déplacer. Le pointeur doit être à la position définie sur l'échelle restante. Consultez votre médecin si vous constatez des résultats inhabituels. A utiliser avec prudence

L'entretien conserve votre débit maximal d'au moins 2 ans. Personal Best répond à la norme EN 13826.

Tableau des mesures:

1. Demandez à votre médecin de vous aider à déterminer votre meilleure valeur personnelle.
2. Entrez la date et l'heure des mesures quotidiennement dans l'endroit désigné dans le Tableau des valeurs mesurées.
3. Sélectionnez votre valeur de mesure ainsi que la date et l'heure de la mesure sur la ligne avec un "X" dans le Tableau des mesures.
4. Le tableau des valeurs mesurées est inclus pour enregistrer vos données.

nettoyage:

Nettoyez votre appareil au moins toutes les deux semaines.

À la main: avec de l'eau tiède et un savon liquide doux. Rincer soigneusement avant la prochaine utilisation et laissez l'air sécher complètement.

Laver au lave-vaisselle: utiliser uniquement dans le panier supérieur.

avertissements:

L'utilisation du débitmètre maximal pour la surveillance des maladies des voies respiratoires, tel l'asthme, doit être effectuée sous la surveillance d'un médecin. Le débitmètre maximal n'est à utiliser que par un Patients.

Stockage: conserver à température ambiante.